

U 100

ergonomic line



SIGER



Компания ЮНИДЕНТ - эксклюзивный дистрибьютор
стоматологических установок SIGER в России

119571, г. Москва, Ленинский проспект, 156
Горячая линия для клиентов +7 (965) 310-3820
Тел.: +7 (495) 434-4601 | Факс +7 (495) 434-1020
www.unident.ru | unident@unident.net | ornt@unident.net

ЮНИДЕНТ-Поволжье, г. Самара, ул. Радонежская, 9
Тел.: +7(846) 979-86-00
office@unident-volga.ru

A close-up photograph of a white dental unit with a yellow patient chair in the foreground. The unit has several dental handpieces and a control panel with buttons. The word 'SIGER' is printed in blue on the side of the unit.


SIGER

U 100

Новая стоматологическая установка от мирового производителя медицинского оборудования SIGER. U100 является представителем нового поколения установок U-серии. Сбалансированные габариты и выдающийся дизайн позволяют наиболее эффективно использовать рабочее пространство врача и ассистента. Пропорциональные формы, основанные на простых и элегантных линиях, создают современный облик установки. Практически все традиционные элементы были обновлены с повышенным вниманием к каждой детали. Продуманная эргономика кресла создает комфортные ощущения для пациента. U100 - идеальный спутник для работы.



Варианты расцветок

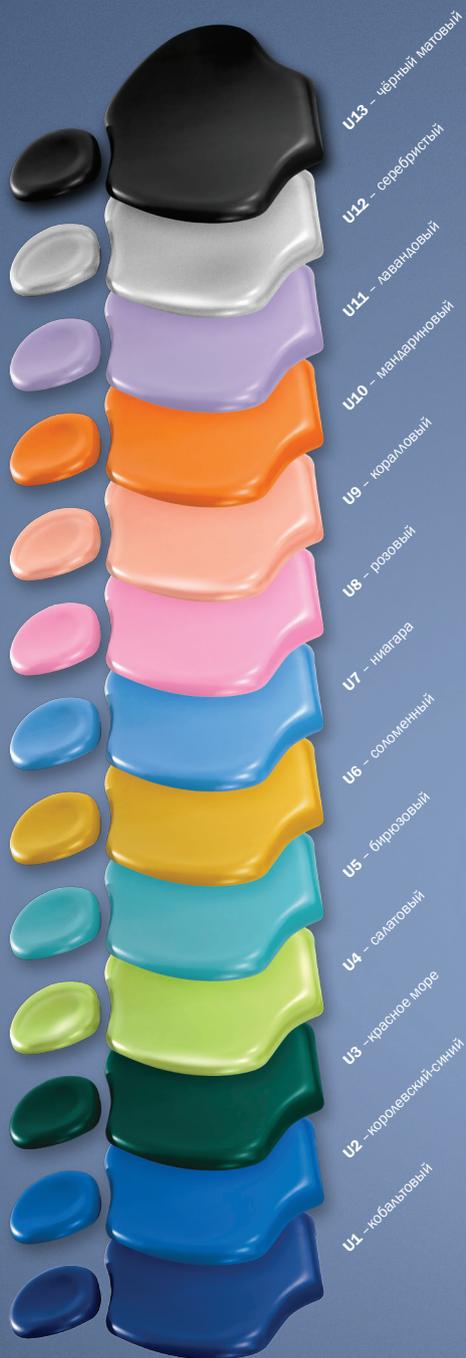

Функции педали

Регулировка положения кресла


Положение для слёвывания/
Запрограммированное положение **A**

Положение высадки пациента/
Запрограммированное положение **B**


Включение/отключение
подачи воды на инструмент

Продувка инструмента

Плавная регулировка
вращения инструмента

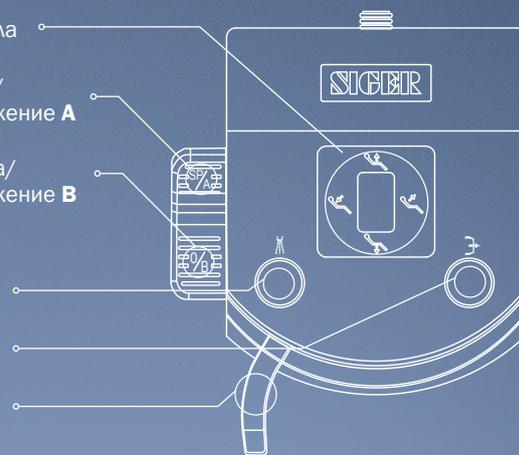

Размеры установки

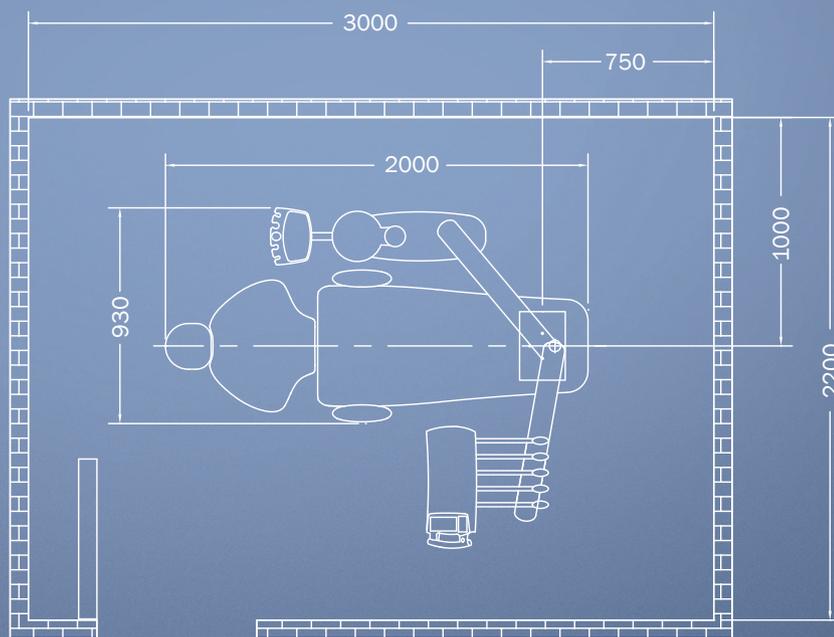

— ergonomic line —



Блок ассистента оснащен пылесосом, слюноотсосом эжекторного типа (при размещении предварительного заказа возможна комплектация под вакуумную помпу Cattani), пистолетом вода/воздух, панелью управления движениями кресла, системами автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы, функцией подогрева воды в стакане пациента.



Гидроблок поворотный, совмещенный с креслом пациента, оснащен системами автоматического наполнения водой стакана пациента, омыва плевательницы, автономной подачи воды на инструменты, фильтром сжатого воздуха с автоматическим сливом конденсата, бойлером для подогрева воды, керамической съемной поворотной плевательницей с возможностью автоклавирования.



Кресло пациента с функцией памяти на 5 положений. Оснащено системой безопасности и аварийной остановкой движения кресла, артикуляционным подголовником для взрослого и детского приемов.




Многофункциональная педаль управления функциями установки.






Светильник бестеновой, галогенный. Мощность 10000-28000 люкс.

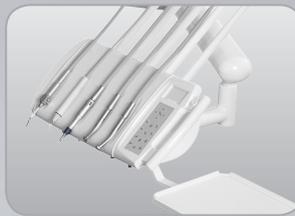

Блок врача на 5 инструментов оснащен пистолетом вода/воздух, системой антисасывания для турбинных шлангов, модулем для подключения пневматического микромотора, негатоскопом, мембранной панелью управления всеми функциями кресла, пневматическим фиксатором блока врача в рабочем положении. Варианты комплектации: нижняя или верхняя подача инструментов.

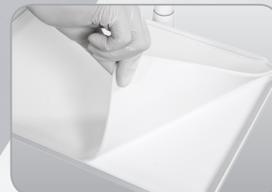

Поднос для инструментов с антибактериальным силиконовым покрытием.



Модуль для подключения турбинного наконечника с волоконной оптикой в базовой комплектации.



Стул врача и стул ассистента в базовой комплектации.

Опции



Высококачественная итальянская обивка (широкий выбор цветов)



Светодиодный светильник SIGER LED с бесконтактной системой включения



Система визуализации: современный подход к обустройству кабинета



Электрический микромотор с внутренней подачей воды

