



M E D I C A L
TECHNOLOGY



Ningbo's medical equipment Co., LTD

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в данной публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении.

Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/элементы, обозначенные в данной инструкции как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации.

Все сочетания моделей и цветов доступны при условии фактического наличия.

За последней информацией обращайтесь к официальным дилерам компании P&T.



Основанная в 2004 году компания P&T Medical Technology занимается высокотехнологичным производством оборудования для операционных, стоматологических, офтальмологических кабинетов и медицинских исследовательских институтов. Большую роль P&T отводит исследованиям, науке и разработке и внедрению новых технологий. Налаженное собственное производство высококачественных марок стали не только позволяет компании проводить строгий контроль качества металлических составляющих, но и благоприятно сказывается на конечной стоимости продукции в пользу покупателя.

Из продукции P&T наибольшей популярностью на рынке пользуются высокотехнологичные и надежные автоклавы, самыми ходовыми моделями являются автоклавы BTD-23 и BTD-17. Однако на этом предоставляемый компанией ассортимент не заканчивается. Уже около пяти лет на российском рынке представлены упаковочные машины, ультразвуковые очистители, аппараты для чистки и смазки наконечников, дистилляторы и многое другое. При разработке и создании оборудования P&T применяются все ведущие европейские технологии, что позволяет продукции компании составить достойную конкуренцию ведущим мировым брендам, в чем-то даже их превосходить. Простое и понятное управление позволяет пользователю разобраться в работе с оборудованием на интуитивном уровне.

В компании P&T работает команда опытных профессионалов, которые дорожат своей репутацией. Качество продукции и внедрение передовых технологий – именно это сочетание помогает нашим клиентам сделать выбор в пользу P&T. Люди доверяют нам своё здоровье, и мы подходим к этому со всей ответственностью.



Автоклавы В-класса



Для уничтожения любых
видов микроорганизмов



BTD17L-A/23

До 4-х циклов предвакуума
Вакуумная сушка
8 программ стерилизации
Температура стерилизации: 121°C, 134°C
Возможность установки температуры вручную: 105°C – 134°C
Автоматическая подача воды
Возможность подключения к ПК (опция)
Принтер (опция)
Объем камеры: 17 л / 23 л
Лотки из нержавеющей стали: 3 шт.
Габаритные размеры (ШхГхВ): 475x572x443 мм / 475x632x443 мм
Вес: 52 кг / 57 кг
475x572x443 мм / 475x632x443 мм
Вес: 52 кг / 57 кг

BTD8L-A/12

Объем камеры: 8 л / 12 л
Вакуумная сушка
8 программ стерилизации
Автоматизированное управление
Температура стерилизации: 121°C, 134°C
Электромеханический замок
Возможность установки температуры вручную: 105°C – 134°C
Автоматическая/ручная подача и слив воды
LCD-дисплей
Полностью русифицированное программное обеспечение
Возможность подключения к ПК (опция)
Принтер (опция)
Лотки из нержавеющей стали: 3 шт.
Размеры камеры (ДхГ): 170x320 мм / 200x360 мм
Размеры (ШхГхВ): 490x437x375 мм
Вес: 45 кг / 48 кг



Компания P&T предлагает вашему вниманию автоклавы от 8 до 22 литров. Таким образом, у вас существует возможность выбрать объем нового автоклава, исходя из ваших индивидуальных потребностей.

Камера автоклава выполнена из высококачественной нержавеющей стали, ее поверхность обрабатывается по специальной технологии.

Удобные коннекторы для слива и залива дистиллированной воды.

Безопасный, полностью автоматический электронный замок выполнен из прочной стали. Он с лёгкостью выдерживает любые показания давления и температуры внутри автоклава.




Весь процесс автоклавирования полностью автоматизирован для обеспечения повышенной безопасности и экономии времени. Для подробного протоколирования при минимальном затраченном времени вы можете воспользоваться принтером, подключить который можно при помощи специального разъема, предусмотренного в конструкции автоклавов P&T.

Автоклавы P&T делают процесс стерилизации быстрым и удобным, что экономит не только ваше время, но и силы.

Упаковочная машина



Стерильный
инструмент
в любой ситуации

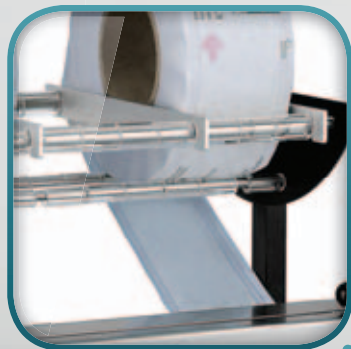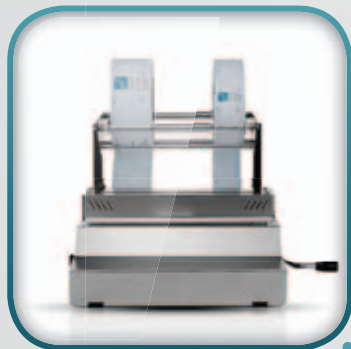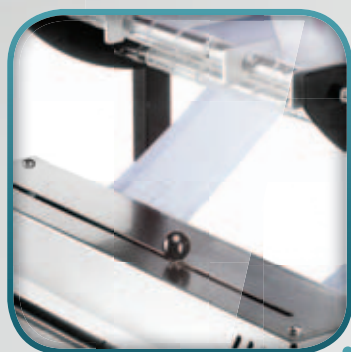

Встроенный двойной нож с повышенной режущей способностью позволяет отрезать пакет непосредственно в процессе герметизации, что сокращает общее время упаковки.

Корпус выполнен из нержавеющей стали, не подвержен эрозии и легко чистится дезинфицирующими средствами.

Подвижные салазки позволяют использовать одновременно несколько рулонов разных размеров.

Регулируемый температурный режим позволяет использовать различные виды упаковок.

По сравнению с требованием международного стандарта ширина сварного шва увеличена на 2 мм для получения непроницаемого и крепкого шва и составляет 10 мм.

Упаковочная машина защитит инструмент от загрязнений во время хранения.

BTFJ-500 – это гарантия стерильности и чистоты.

BTFJ-500

Мощность при нагреве: 500 Вт

Время предварительного разогрева: 2 мин

Максимальная упаковочная ширина: 250 мм

Скорость запечатывания: 7,5 м/мин

Температура нагрева: 220°C

Рукоятка регулировки прижима

Ширина сварного шва: 10 мм

Электропитание: 220В, 50~60 Гц

Габаритные размеры (ШхВхГ): 340x250x420 мм

Вес: 8 кг

Аппарат для чистки и смазки наконечников



Бережный уход
за наконечниками



Одновременная обработка сразу трех наконечников с любым типом соединений. Два разъема для турбинных высокоскоростных и один разъем для низкоскоростных инструментов.

Удобное наполнение емкости маслом. Герметичная крышка винтового типа. В комплекте поставляется комбинированное медицинское масло для смазки и дезинфекции наконечников.

Возможность выбора одного из трех режимов смазки для каждого наконечника по отдельности.

Редуктор аппарата оборудован фильтром-влагоотделителем и манометром, что делает процесс продувки абсолютно безопасным для внутреннего механизма наконечников.

Излишки масла впитываются в сменные хлопковые аппликаторы, поставляемые в комплекте с BTY-700.

Портативный и компактный аппарат впишется в интерьер любого стоматологического кабинета.

BTY-700

Индикатор количества масла в резервуаре на передней панели

Съемная передняя панель для удобной очистки

Масло в комплекте: 750 мл

Давление воздуха: 0.35~0.60 МПа

Объем резервуара для масла: 350 мл

Электропитание: 220В, 50~60 Гц

Габаритные размеры (ШхВхГ): 275x355x285 мм

Вес: 7,5 кг

Медицинский дистиллятор



Высокая мощность
для производства
дистиллированной
воды



Дистиллированная вода производится путем конденсации пара от кипящей воды. В процессе работы дистиллятора загрязнения и осадок остаются во внутренней колбе, а дистиллят стекает в накопительную емкость.

- Колба дистиллятора выполнена из специально обработанной нержавеющей стали.
- Съемный носик с угольным фильтром для дехлорирования и дополнительной очистки воды от растворенных солей, органических соединений.
- В комплект входит емкость для сбора дистиллированной воды.
- Компактные размеры и высокая производительность.

Вместе с дистиллятором вы получаете средство для удаления осадка и загрязнений из колбы.

WATER DISTILLER

Производительность: 0,7 л/час

Емкость: 4 л

Мощность: 750 Вт

Отключение питания при достижении температуры в 160°C

Электропитание: 220В, 50~60 Гц

Габаритные размеры (ШхГхВ):
240x240x390 мм

Вес: 4 кг

Ультразвуковые ванны



объем
от 3 до 40 литров



BTX600 40L

Режим частотной модуляции
Объем: 40 л
Рабочая частота: 60 кГц
Мощность: 1000 Вт
Таймер: от 1 до 99 мин
Кран слива воды
Корпус из нержавеющей стали
Размер лотка: 620x500x200 мм
Вес: 18 кг



BTX600 10L

BTX600 10L
Объем: 10 л
Рабочая частота: 60 кГц
Мощность: 240 Вт
Таймер: от 1 до 99 мин
Кран для слива воды
Корпус из нержавеющей стали
Размер лотка: 300x240x150 мм
Вес: 8,5 кг
Режим частотной модуляции (опция)

BTX600 10L с подогревом

Температура нагрева: 20-80°C
Мощность: 250 Вт



BTX600 7L

Объем: 7 л
Рабочая частота: 60 кГц
Мощность: 240 Вт
Таймер: от 1 до 99 мин
Кран слива воды
Корпус из нержавеющей стали
Размер лотка: 500x140x100 мм
Вес: 7,5 кг
Режим частотной модуляции (опция)

BTX600 7L с подогревом

Температура нагрева: 20-80°C
Мощность: 250 Вт



BTX-600 5L

Объем: 5 л
Рабочая частота: 60 кГц
Мощность: 200 Вт
Таймер: от 1 до 99 мин
Кран для слива воды
Корпус из нержавеющей стали
Размеры лотка: 240x140x150 мм
Вес: 6 кг

BTX600 5L с подогревом

Температура нагрева: 20-80°C
Мощность: 150 Вт



BTX-600 3L

Объем: 3 л
Рабочая частота: 50 кГц
Мощность: 200 Вт
Таймер: от 1 до 99 мин
Корпус из нержавеющей стали
Размеры лотка: 240x140x100 мм
Вес: 5 кг

BTX600 3L с подогревом

Температура нагрева: 20-80°C
Мощность: 150 Вт



Ультразвуковые мойки компании P&T являются лидерами в области ультразвуковой очистки. Помимо обширного функционала они отличаются широкой номенклатурой объемов – от 3 до 40 литров. Все модели ультразвуковых моек P&T полностью (включая корпус и корзину для инструментов) изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Конструкция из нержавеющей стали отличается высокими потребительскими качествами, стойкостью к коррозии и перепадам температур, а также отсутствием среды для распространения бактерий и вирусов.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ R&T В РОССИИ

Архангельск	ООО «Архимед»	arhimed29@mail.ru	(8182) 420-431
Архангельск	ЗАО «Инмед»	mail@inmedzao.ru	(8182) 63-31-52, 63-31-74, 63-32-02
Астрахань	ООО «Кутум»	kutum77@yandex.ru	(8512) 52-54-08, 52-54-09, 52-54-10
Барнаул	ООО «Сибирская стом. компания»	sibstomcom@yandex.ru	(3852) 200-781, 200-782, 200-783
Белгород	ООО «Медика-Сервис»	medica@mse.vrn.ru	(4722) 33-38-53
Бийск	ООО «Алтаймедсервис»	altaymed@rambler.ru	(3854) 31-16-12, 31-16-02
Братск	ООО «Братская медицинская компания»	atis99@mail.ru	(3953) 46-53-71, 46-47-71
Благовещенск	ЧП Панченко Р.Р.	stom2@amcm.ru	(4162) 52-40-75, 51-38-07
Великий Новгород	ООО «Медикал Инвест Групп»	medical53@mail.ru	(8162) 66-76-17, 8-963-333-9-333
Владивосток	ООО «Денталь Плюс»	dentalplus-vl@yandex.ru	(423) 241-80-94, 241-85-10, 243-52-27
Владивосток	ООО «Стоммаркет»	info@stommarket.com	(423) 240-44-84, 240-68-90
Владивосток	ООО «СК А-2»	stom-a2@mail.ru	(423) 265-05-85, 265-05-95
Владивосток	ООО «ДэмДэпо»	dentoff@mail.ru	(423) 251-39-90, 230-08-70
Владимир	ИП Бурдонов Н.В.	kolinbnv@mail.ru	(4922) 43-00-22
Владимир	ООО «Медика Профи»	predein-medika@rambler.ru	(4922) 42-13-67, 32-60-90
Волгоград	ООО «ДЭМ»	volgdem@mail.ru	(8442) 26-67-26
Волгоград	ООО «Элита - Мед»	elmed@list.ru	(8442) 32-85-89
Волгоград	ООО «Дентал»	dentalvolga@mail.ru	(8442) 23-88-99, 24-37-24, 24-38-21
Волгоград	ООО "СтомЭкспресс"	stomexpress@mail.ru	(8442) 30-51-81, 8-961-080-00-16
Волгоград	ООО «ВЦПО «ФАВОР»	med1@favore.ru	(8442) 70-78-87, 70-74-42, 70-98-90
Волгоград	ООО «Медтовары»	medtov@mail.ru	(8442) 49-36-28, 41-13-48
Вологодск	ООО «Олимп»	stoma-olimp@yandex.ru	(8639) 25-15-44
Вологодск	ООО «Фаворит - Дент»	Favorit-Dent@Rambler.ru	(8639) 24-11-29
Вологда	ООО «Инжмедсервис»	neds@vologda.ru	(8172) 72-61-39, 72-53-46
Воронеж	ООО «Медика-сервис»	medica@mse.vrn.ru	(4732) 53-24-66, 53-28-81, 54-57-05
Екатеринбург	ИП «Минкин Алексей Петрович»	masterdent1@mail.ru	(343)287-50-50, 200-90-55
Екатеринбург	ЗАО «Мегадента»	megadenta@megadenta.ru	(343) 388-09-09
Екатеринбург	ООО «Торговый дом АВЕРОН»	dent@averon.ru	(343) 233-25-33, 233-25-30
Екатеринбург	ООО «Дентал-Сервис К»	info@contact-kr.ru	(343) 270-00-83
Екатеринбург	ООО «ТД Медион»	medion@sky.ru	(343) 251-48-10, 251-47-38
Екатеринбург	ООО «Дента-Маркет»	livshic@list.ru	(343) 261-53-56
Ижевск	ООО РМК «Дентторг»	company@denttorg.ru	(3412) 72-55-75, 72-30-16, 72-43-25
Иркутск	ООО «Блик-Трейд»	bliktrade@irk.ru	(3952) 25-84-20, 20-09-82
Казань	ООО «Фирма Камед»	KRAN07@yandex.ru	(843) 236-06-91, 236-54-73, 236-64-73
Казань	ЗАО «Компания Киль-Казань»	kiel-kazan@yandex.ru	(843) 26-19-372, 26-19-382, 26-19-392
Калининград	ООО «Медицина»	medicina@edkar.ru	(4012) 46-69-46, 46-75-83
Кемерово	ООО «Стомлюкс»	stomlux@yandex.ru	(3842) 75-63-50, 75-58-95
Кемерово	ООО «Сибмед»	PersonaSM@mail.ru	(3842) 75-66-33
Киров	ООО «Велес Мед»	velesmed@yandex.ru	(8332) 64-11-11, 34-11-10, 64-66-47
Киров	ООО ПКФ «Реал-Дент»	real-dent@mail.ru	(8332) 35-42-42, 38-39-39, 35-43-53
Комсомольск-на-Амуре	ООО «ДАН»	darmenkot@mail.ru	(4217) 20-11-65, 59-22-25
Кострома	ООО НПФ «Костромская медтехника»	info@medtech.ru	(4942) 45-33-45
Краснодар	ООО «Дента-Гранд»	dimsan507@mail.ru	(861) 231-46-48, 231-48-93, 262-62-51
Краснодар	ООО «Актив Медикал Кубань»	stomcomp@mail.ru	(861) 259-54-52, 259-55-82
Краснодар	ООО «Алеко-Кубань»	alleko-kuban@yandex.ru	(861) 233-29-04, 8-918-469-4385
Красноярск	ООО ПВП «Контакт»	info@contact-kr.ru	(391) 27-37-156
Красноярск	ИП Якимов Ю.П	yakimov.y.p@mail.ru	(3912) 50-47-32
Курск	ООО «Медика-Сервис»	medica@mse.vrn.ru	(4712) 70-04-07
Курган	ИП Божко М.А.	bma45@mail.ru	(3522) 42-29-74
Курган	ИП Шипицына О.Н.	olga-shipicyna@rambler.ru	(3522) 41-16-22, 41-16-36
Липецк	ООО «Медика-Сервис»	medica@mse.vrn.ru	(4742) 35-73-70
Магадан	ООО «Медмаркет»	medmarket@maglan.ru	(4132) 609-555
Майкоп	ИП Чеботарь Л.Н.	maykop-stoma@mail.ru	(8772) 54-07-76, 8-961-531-71-55
Махачкала	Стом.магазин «Лекарь»	Lekar102@mail.ru	8-928-516-65-26, 8-919-443-01-11
Москва	ООО «Гриндент»	greendent@greendent.ru	(495) 500-79-45
Москва	ООО «Эль-Дент»	el.dent@mail.ru	(495) 789-67-39
Мурманск	ООО «Дентал+»	dental51@mail.ru	(8152) 68-89-05
Назрань	ИП Ужахов И.С.	saidu@list.ru	(873) 222-64-70, 222-65-16
Нижневартовск	ИП Наибов О.В.	maestro-stomat@mail.ru	(3466) 65-16-52, 45-04-08

Н. Новгород	ООО «Медфарм»	fitobar@mail.ru	(831) 422-54-87, 422-54-79
Н. Новгород	ООО «МедиМакс»	tdmed@yandex.ru	(831) 432-57-26, 432-59-98
Н. Новгород	ООО «ФармаСтом»	volga-dent@mail.ru	(831) 439-32-71, 439 43 01
Новокузнецк	ООО «МедНК»	79264@gmail.com	(384) 353-88-09
Новоросийск	ООО «Крокус»	krokys@bk.ru	(8617) 63-79-71, 8-988-770-51-15
Новосибирск	ООО «ЮНА»	nsk.una@ngs.ru	(383) 227-71-71
Орел	ООО «Альмега»	oooalmeга57@yandex.ru	(4862) 41-34-29, 42-24-06, 41-50-89
Омск	ЗАО «Омдент»	omdent92@bk.ru	(3812) 25-57-39
Омск	ОАО ПТП «Медтехника»	medtehnika@mail.ru	(3812) 31-45-96, 45-05-39, 31-37-90
Пермь	ООО «Денталсервис»	dentomat@mail.ru	(342) 227-72-10, 227-72-40
Пермь	ИП Сидоров В.А.	dentmasterperm@mail.ru	(342) 238-36-27, 244-72-71
Пермь	ООО «Медика Дент»	medica-dent@perm.ru	(342) 276-18-60, 244-56-47
Пятигорск	ООО «Дент-Ал»	info@dent-al.ru	(8793) 33-92-75, 33-92-74, 33-46-72
Ростов-на-Дону	ООО «Статус-Дон»	status_don@mail.ru	(863) 245-30-59, 8-905-479-53-33
Ростов-на Дону	ООО «Олимп»	stoma-olimp@yandex.ru	(863) 231-84-01, 231-84-02
Ростов-на-Дону	ООО «Дента-Маркет»	dentamarket@aaaanet.ru	(863) 297-25-05, 297-25-00
Ростов-на-Дону	ООО «Ильин и сыновья»	nikstom@yandex.ru	(863) 267-59-39, 263-04-58
Рязань	ООО «Санация»	ssk-inna@yandex.ru	(4912) 27-31-31, 27-31-60
Самара	ООО «Юнидент-Поволжье»	office@unident-volga.ru	(846) 979-86-00, 01, 02, 03
Санкт-Петербург	ООО «Северная Каролина»	info@carolinaspb.ru	(812) 702-81-12
Санкт-Петербург	ООО «Торговый дом «Ример»	rimer@hotmail.ru	(812) 222-72-22, 222-71-32
Санкт-Петербург	ООО «Джи-Ви-эм Транзит»	jymtranzit@rambler.ru	(812) 454-11-57, 454-11-56
Санкт-Петербург	ООО «М-Стайл СПб»	mstylespb@yandex.ru	(812) 764-44-65, 764-44-56
Санкт-Петербург	ООО «Тиара-медикал»	info@tiaramed.ru	(812) 494-06-95, 931-61-56
Смоленск	ООО «Дента»	denta_smolensk@mail.ru	(4812) 64-9666, 62-82-76
Сочи	ООО «Элитмедсервис»	elitmedservis@rambler.ru	(8622) 53-57-59, 8-918-402-15-55
Ставрополь	ООО «Статус-СТ»	irga75@mail.ru	(8652) 37-20-84, 37-06-72
Ставрополь	ООО «Медицина Ставрополь +»	medicina_plus@mail.ru	(8652) 55-08-63, 8-962-402-81-58
Сургут	ООО «Медсервис»	meduslug@wsmail.ru	(3462) 24-11-81, 24-06-09
Сургут	РМК «Дентторг»	klimumk@bk.ru	(3462) 21-59-21, 21-56-53
Сыктывкар	ООО «Мединвест»	galinamed@rambler.ru	(8212) 20-23-69, 24-83-83
Сыктывкар	ООО «Новамед»	novamed@inbox.ru	(8212) 24-29-73, 8-922-277-37-64
Тамбов	ООО «Медика-Сервис»	ООО «Медика-Сервис»	(4752) 76-06-12
Тольятти	ООО «Визави Дента Мед»	vizmed@tolcom.ru	(8482) 22-59-35, 25-17-99
Тверь	ООО «Эркастом-Тверь»	natgeras@mail.ru	(4822) 42-28-11, 42-92-33
Тверь	ООО «Стоматологическая клиника»	klinikabobrika@yandex.ru	(4822) 76-40-37
Тверь	ООО «Тверская Стоматология»	tverstom@bk.ru	8 (4822) 32-40-75, 41-86-26
Томск	ООО «Медстар +»	medstarplus1@mail.ru	(3822) 51-51-16, 51-79-78
Тюмень	ЗАО «Мегадента»	filial@megadenta.ru	(3452) 22-93-06, 22-93-07
Улан-Удэ	ООО «Митра»	info@mitra03.ru	(3012) 29-77-00, 29-74-91
Уссурийск	ООО «Медика»	dentus@mail.ru	(4234) 32-98-23
Уфа	РМК «Дентторг»	ufa@denttorg.ru	(347) 248-21-11
Хабаровск	ИП Зотов В.А.	dental_kompleks@mail.ru	(4212) 32-72-83
Хабаровск	ООО «Техмедсервис»	tmsv@inbox.ru	(4212) 91-02-88, 91-02-81
Чебоксары	ООО «Медфодент»	medfodent@mail.ru	(8352) 22-60-23, 44-70-37
Челябинск	ООО «Медипарт-Челябинск»	medipart-ural@mail.ru	(3512) 60-86-65, 32-62-33
Чита	ООО «Ривадент»	nomastom@mail.ru	(3022) 20-20-30, 20-20-10, 36-03-60
Южно-Сахалинск	ООО «Ален»	vpaurus@yandex.ru	(4242) 46-87-17, 8-914-757-30-55
Южно-Сахалинск	ООО «Сахмедсервис»	mt@sakhmeds.com	(4242) 43-40-98, 42-52-19, 42-57-33
Южно-Сахалинск	ИП Кузьменко В.В.	new_dent@mail.ru	(4242) 43-53-78, 73-55-11
Южно-Сахалинск	ООО «Мегадент»	zykova88@mail.ru	(4242) 42-30-20, 42-30-21
Якутск	ООО «Мединфарм»	iaq24@mail.ru	(4112) 23-37-63
Якутск	ООО «Руно-Мед»	runoykt@gmail.com	(4112) 36-38-34, 35-10-99
Якутск	ООО «Сахамедсервис»	sakhamed@mail.ru	(4112) 43-79-25, 43-65-44, 43-76-72
Ярославль	ООО «М.М.Дент»	76medkom@rambler.ru	(4852) 73-10-36, 94-69-25, 33-06-92



**Эксклюзивный дистрибьютор
P&T в России**

119571, г. Москва, Ленинский проспект, 156
+7 (495) 434-46-01 | fax +7 (495) 434-10-20

Горячая линия для клиентов +7 (965) 310-38-20
www.unident.ru | unident@unident.net | ornt@unident.net